

毎日の服薬をサポート

eお薬さん

あれ?
今日はお薬
飲んだかな

お薬の飲み忘れや飲み間違いを防ぐ「eお薬さん」は、患者様ご自身やご家族、薬剤師、看護師などによる服薬管理をサポートします。また、離れた場所からでも、患者様の服薬状況を確認することができます。

お母さん
ちゃんとお薬
飲んでるね

1日1回(28日)、2回(14日)、4回(7日)の3つのソフトウェアをご利用いただけます。

- 決められた時間に決められた量を服薬できる環境をつくり、**飲み忘れや過量服薬を防止**します
- 服薬情報の共有により、患者様とご家族、医療・介護職の連携を強めます
- 「**自宅で自分らしい生活を、いつまでも長く送りたい**」の想いに応えます



※当機器は医療機器ではありません。
※ご使用方法およびご使用上の注意につきましては、
当機器の取扱説明書をご覧ください。

*IT賞は「ITを活用した経営革新」に顕著な努力を払い、成果を挙げたと認める企業・団体に公益社団法人企業情報化協会から授与されます。



eお薬さんの特徴

● 1日4回*までタイマーによる設定が可能です

設定された時間になると、お薬ケースがトレーに乗って押し出されます。*1日4回のソフトウェアご利用時

● お好みの音声で、服薬時間をお知らせします

チャイム音とともに、機器から音声が流れます。

録音機能により、お子さんやお孫さんなど、ご家族の声でお知らせすることができます。

● スヌーズ機能で、繰り返しお知らせします

お薬ケースが取り出されない場合、5分ごとに音声でお知らせします。

● 過量服薬を防止する、トレー引き戻し機能つきです

40分経過してもお薬ケースが取り出されない場合、トレーが自動的に戻ります。

一度に複数のお薬ケースが押し出されることはありません。

● 離れた場所からも、お薬ケースの取り出しが確認できます

お薬ケースが取り出されると、クラウド**を経由して、ご家族や薬剤師など登録された方に、メールでお知らせします。

** データ共有サービス

クラウドをご利用いただくには、Wi-Fi等、通信環境が必要です。

● お薬ケースの取り出し時刻が記録されます

クラウドに保存された記録をいつでも閲覧できます。

サーバーから20文字以内のメッセージを機器に送信

して、表示することができます。

2016年12月01日 (木)

通信中

16:35

次のお薬 よる 18:00

お母さん、明日会いに行くわね♪

メッセージ表示(イメージ)



3つのソフトウェアで1日1回28日、
2回14日、4回7日に対応

*ソフトウェアはホームページ [https://www.e-okusurisan.com/] から
ダウンロードして機器にインストールしてください。

前面カバーを施錠して、不要な取り出しを防止します

一包装した分包がそのまま入ります
(内径 70mm×80mm)



同封のお薬ケース用シール
で服薬時点ごとにケースを
分けられます

半透明なので、
外から中身を確認できます

お薬ケース開閉口：
へこみ部分を押し
と簡単に開きます



手に馴染んで
持ちやすい
ラウンド形状
です

通信による“見守り支援”機能

ご利用いただくには、Wi-Fi等、通信環境が必要です



2016年12月01日 (木) 通信中

16:35

次のお薬 よる 18:00

お母さん、明日会いに行くわね♪

メッセージ表示(イメージ)



情報を暗号化

専用クラウド

「eお薬さん」1台ごとの専用サイト
(ID・パスワードによる管理)

服薬情報を共有

ご家族、医師、薬剤師、看護師、ケアマネージャー、介護従事者 など



お知らせ先は自由に設定できます (5件まで)
お知らせメールの通知内容は選択可能です

件名 : e お薬さん 昼の薬が取り出されました

To: お薬太郎
○月○日

寄材花子様

昼のお薬ケースが取り出されました。

登録機器シリアル番号: 18101933
取り出し時間: 12時45分

eお薬さんクラウドサービスへのログインURL:
<https://mng001.e-okusuran.com>

ご不明点などは、下記お問い合わせ先へご連絡ください。


お問い合わせ先: eお薬さんコールセンター
Tel: 0120-71-0933
(受付時間: 平日9:00~17:00)

通知メール(イメージ)

記録の閲覧



毎日の服薬時点別にお薬ケース取り出し時刻を折れ線グラフや一覧表で表示します
記録を印刷して、1か月の服薬管理指導の報告にご活用いただけます

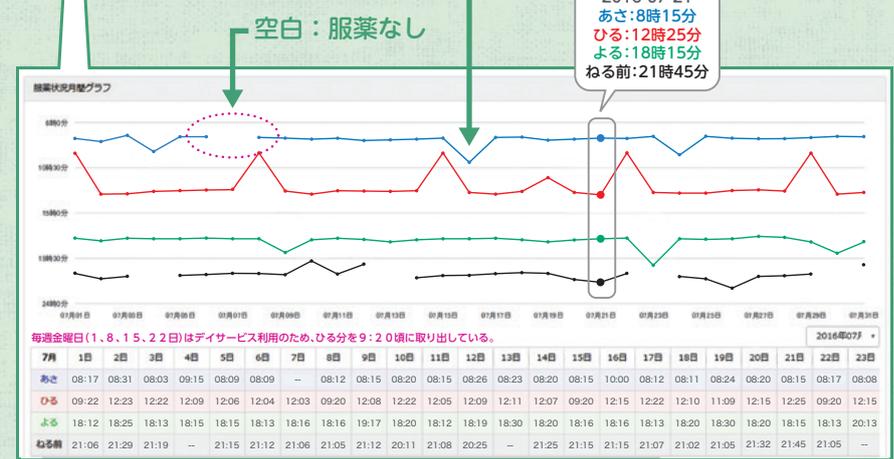

取り出し記録(イメージ)

eお薬さんを使用した方の声

(ご利用いただいた一部の方の感想です)

認知症の奥様を介護するご主人

時間通りに服薬させるプレッシャーから解放され、気が楽になりました。

独居の母親を支援する娘さん

使用3カ月後に、取り出し時刻が乱れ始めたため、病院に連れて行きました。取り出し記録が、生活リズムの変化に気づくのにとても役に立ちました。


高齢者施設での配薬に、ご活用いただいた薬局様

看護師の詰め所に設置。食事時に施設職員がテーブルにお薬ケースを用意することで、薬の取り違いなどのミスが改善されました。配薬準備の手間もなくなり、施設の看護師から大変喜ばれています。



eお薬さん 機器説明

各部の説明

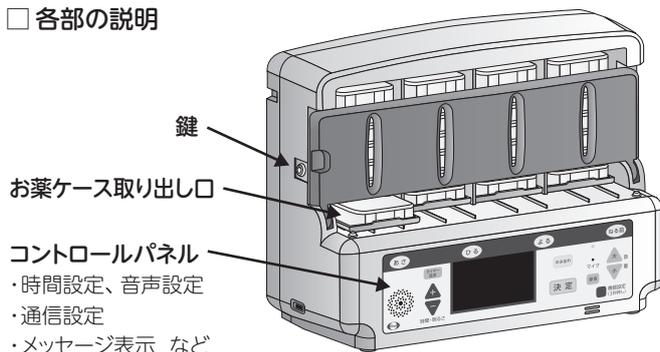

コントロールパネル
・時間設定、音声設定
・通信設定
・メッセージ表示 など

仕様

本体サイズ：幅402mm、奥行き177mm、高さ320mm
本体重量：約3.5kg(機器+お薬ケース)
電源(日本)：AC100V、50/60Hz
消費電力：待機時3.0W、トレー動作時約4.0W
電源コード長さ：3m(ACアダプターのコードを含む)

付属品

- お薬ケース×30個
- 前面カバーの鍵×2個
- お薬ケース用シール(あさ・ひる・よる・ねる前)
- 取扱説明書
- 初期設定通知書(クラウド登録)

※当機器は医療機器ではありません。 ※ご使用方法およびご使用上の注意につきましては、当機器の取扱説明書をご覧ください。

機器に関するお問い合わせ

コールセンター ☎️ **0120-71-0933** (平日9:00~17:00 除 土日祝、エーザイ休業日)

eお薬さんの紹介サイト

<https://e-okusurisan.com>

eお薬さん



取り扱い薬局・施設